



Abri-Let Midi

INCONTINENCE

ABRI-LET

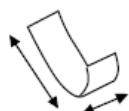

15 x 47 cm

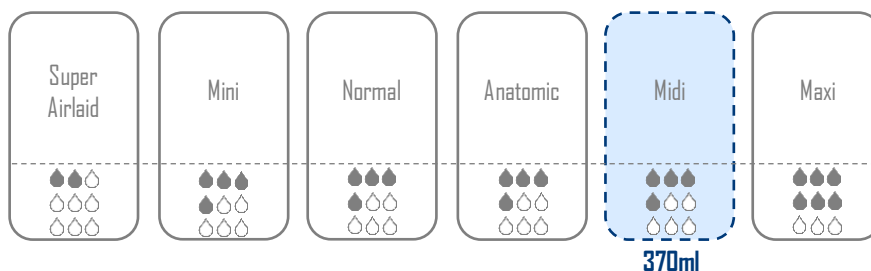

UTILISATEURS

AUTONOME

SEMI-AUTONOME

INCONTINENCE LÉGÈRE

INCONTINENCE MODÉRÉE



Canaux absorbants

Le coussin est formé de canaux absorbants qui aspire le liquide et le diffuse sur l'ensemble de la surface du change.

Non-traversable

La protection est composée d'une face externe plastifiée empêchant le liquide de la traverser.

DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% Fluff de cellulose non blanchi au chlore (ECF-free)
Non-tissé	Coverstock polypropylène, non-tissé hydrophile permanent
Voile externe	Plastique
Adhésif (colle)	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates

DIMENSIONS PRODUIT

Longueur	470 mm (+/-20%)
Largeur, devant	150 mm (+/-10%)
Largeur, arrière	150 mm (+/-10%)
Longueur tampon absorbant	400 mm (+/-20%)

ABSORPTION

Poids produit : 45g (+/-10%)

Test Rothwell ISO 11948-1	370 ml
---------------------------	--------



Dispositif médical Classe I
MDR (EU) 2017/745



ISO 9001
ISO 14001

OHSAS
18001:2008

Management de la
santé et de la
sécurité au travail



GMP
Good
Manufacturing
Practices



Abri-Let Midi

DONNÉES LOGISTIQUES

Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton
6	28	168
Cartons / Palette	Cartons / Palette gerbée	
28	-	
EAN Carton	EAN Sachet	
5703538031083	5703538031076	
Dimensions carton	Poids net carton	
550 x 230 x 450 cm	7 560 g	

GUIDE D'UTILISATION

Protection droite absorbante pour une utilisation polyvalente. Il est suggérer de l'utiliser avec un sous-vêtement de maintien spécial, type Abri-fix.

PRODUITS ASSOCIÉS



Découvrez la gamme complète de soins de la peau et d'essuyage corporel ABENA



www.abena-frantex.fr

